

Használati útmutató

HU

Otthoni nyirokmasszírozó (modell BG-S-1981)

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Felhasználási cél:

Lábak nyirokmasszázsja

Műszaki jellemzők:

Áramforrás: adapter AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (vagy 4db AA 1,5 V - nem része a készletnek).

Teljesítményfelvétel: 4,8 W

Nyomás a mandzsettákban: 10 - 40 kPa

Ellenjavallatok:

Korlátozott használat

A) abszolút tilos

- szoptatás alatt
- terhesség (a terhesség 3. hónapjáig - károsíthatja a magzatot)

B) relatív (az orvos utasításai szerint)

- karcinóma (rák)
- akut fertőzések (vírusos és bakteriális fertőzések)
- glaukóma (zöld hályog)
- magas szemnyomás
- szívbetegség
- pajzsmirigy-túlműködés
- súlyos májbetegség
- asthma bronchiale
- varix (visszerek)
- magas vérnyomás
- vesebetegség

Figyelmeztetés: Az első használatba vétel előtt konzultáljon kezelőorvosával.

Az alábbi egészségügyi problémákkal küzdő személyeknek tilos a készülék a használata, vagy kizárólag a kezelőorvossal történő konzultáció alapján lehetséges:

- magas vérnyomás
- szívproblémák
- osteoporózis
- törések, ficamok, izomgörcs
- akut betegség
- rosszindulatú daganat
- akut vagy gennyes gyulladás a lábon

- menstruáció
- terhesség
- láz (38 °C-nál magasabb testhőmérséklet)
- vérszegénység
- érzékeny, gyulladt bőr vagy egyéb bőrprobléma
- orvosi kezelés alatt álló személyek
- fejfájás, gyomor- és bőrbetegségek
- alkoholfogyasztás
- más orvosi eszköz vagy kezelés alatt
- egyéb rendellenességek
- ne használja a készüléket az útmutatóval ellenkező célokra és módon

Figyelmeztetés:

Elektromos készülékek üzemeltetésekor mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket. Legyen fokozottan körültekintő, ha a készülék közelében gyermekek tartózkodnak.

- Soha ne merítse vízbe a készüléket, a kábelt és a csatlakoztató dugót!
- A használat végén mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a kábeldugót a fali elektromos aljzatból. Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa.
- Ne tárolja és ne helyezze a készüléket olyan helyeken, ahol vízzel vagy egyéb nedvességgel érintkezhet, mint pl. kád, mosdó, toalett, mosogató stb.
- A baleset-, tűz- és áramütésveszély elkerülése végett a bekapcsolt, áram alá helyezett készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne használjon a készülékhez a gyártó által nem javasolt egyéb kiegészítő tartozékokat. Mindig tartsa be az útmutatóban közölt biztonsági útmutatásokat.
- A készüléket tartsa gyermekektől távol.

Ne használja a készüléket:

- fürdés vagy zuhanyzás közben
- ha a kábel vagy a csatlakoztató dugó sérült
- ha a készülék rendellenesen működik, leesett
- ha a készülék vízbe esett
- ha a készülék egyéb módon megsérült
- ha fáradt, kimerült vagy egyéb rosszulletet tapasztal


A termék nem gyógyászati segédeszköz! A készülék otthoni nyirokmasszázszt biztosít. A termék használata nem helyettesít és nem garantál semmilyen orvosi, gyógyászati beavatkozást. Javasoljuk, hogy a készülék használatával kapcsolatban kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

A készülék működési elve

A vezérlő egység levegőt pumpál a mandzsettákba, amelynek köszönhetően a váltott levegőnyomás kellemes masszázst biztosít a lábaknak. Használat közben tartsa kezében a vezérlő egységet. Mindig a legalacsonyabb fokozaton kezdje használni a készüléket, majd növelheti a fokozatot igényeinek megfelelően. A vezérlő egység működtetéséhez négy 1,5V AA elem szükséges (nem része a készletnek) - a hatékony működés érdekében javasoljuk, hogy használjon kiváló minőségű alkalikus elemeket vagy adaptert AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (része a készletnek).

A készlet tartalma:


- C - 2x masszázsmandzsetta a láb alsó részére
- B - 2x masszázsmandzsetta a combokra
- A - 1x vezérlő egység
- D - 1x csatlakoztató csövek
- E - 1x AC/DC adapter

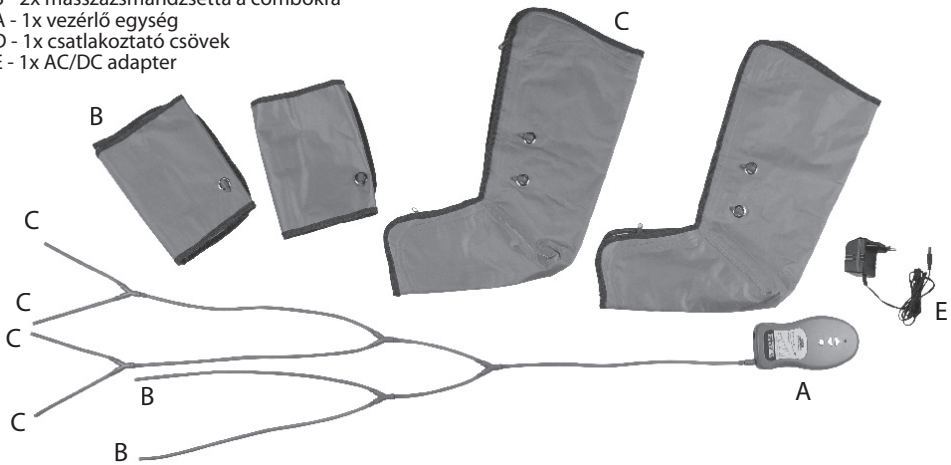

Használat:

A készülék vezérlése rendkívül egyszerű. Használhatja ülő- és fekvőhelyzetben egyaránt. Először állítsa be a kívánt programot, amely ezután automatikusan felfújja és kiereszti a mandzsettákat, miközben kellemes hullámmasszázszt biztosít a lábaknak, megszabadítva őket a feszültségtől és fáradtságtól. A kellemes levegőnyomásos masszázs fokozatosan és finoman oldja a feszültséget és javítja a vérkeringést.

- 1) Helyezze fel a **láb alsó részére (C)** és a **combokra (B)** való masszázsmandzsettát a megfelelő helyzetbe. A mandzsetta cipzárját teljesen húzza fel.
- 2) Csatlakoztassa a **láb alsó részére (C)** és a **combokra (B)** való masszázsmandzsettát a **vezérlő egységhez (A)** a **csatlakoztató csövek (D)** segítségével.
- 3) Csatlakoztassa az AC/DC adaptert a vezérlő egységhez. Ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen, majd csatlakoztassa a kábelt a fali elektromos aljzathoz.
- 4) A készülék elemekkel való működtetése esetén, helyezze be az elemeket a vezérlő egység hátoldalán lévő rekeszbe. Azonos típusú elemeket használjon (ne használjon egyidejűleg régi és új elemeket, illetve alkalikus és nem alkalikus elemeket). Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezkedésére.

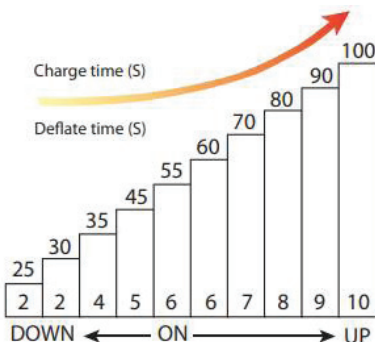

Charge time (S): = nyomáskiejtés (másodpercekben)

Deflate time (S): = leeresztés (másodpercekben)

A rajzon az egyes oszlopok tetején levő szám azt jelenti, hogy meddig tart a felfúvás (mp), az alsó pedig azt, hogy meddig tart a leeresztés (mp), mind a két érték másodpercben. Bekapcsoláskor a készülék mindig a balról 5. fokozatban indul be, tehát a felfúvás 55mp, a leeresztés 6mp. Ha más értéket szeretne megadni, akkor annyiszor kell megnyomnia egymás után az UP (felfelé), illetve a DOWN (lefelé) gombot. Tehát ha pl. a 80mp/8mp fokozatot szeretné, akkor 3x kell megnyomnia az UP gombot. Ha ezután mondjuk a 20mp/2mp fokozatra váltana, akkor 6x a DOWN gombot. Sajnos a készülék nem jelzi ki, hogy éppen melyik fokozatban van, de ha kikapcsolja és újra be, akkor automatikusan az 55mp/6mp fokozatba áll.

- 5) A vezérlőpanelen található "POWER" gombbal kapcsolja be a készüléket, ekkor világítani kezd a LED indikátor. A készülék a gomb ismételt megnyomásával kapcsolható ki.
- 6) Az "UP" és "DOWN" gombokkal beállíthatja a masszázs időtartamát.
- 7) A láb alsó részére (C) és a combokra (B) való masszázsmandzsettákat egyszerre és külön is használhatja.
- 8) A masszázs végén kapcsolja ki a készüléket, válassza le róla a csatlakoztató csöveket a levegő kieresztése céljából, majd vegye le a csövekről a mandzsettákat.

Fontos tudnivalók:

A készülék egyetlen tartozéka sem mosható mosógépben. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, fehérítőket. A felületre tapadt por eltávolítását enyhén benedvesített kendővel végezze.

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megromlás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz:

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.